



CANDELA®
vea la diferencia



El láser más usado en el mundo de la salud y la estética unido a la tecnología y respaldo de Candela.

El GentleYAG es el láser de NdYag más completo y versátil del mercado.

El GentleYAG (DCD) de Candela es el único láser de 1064nm que puede tratar todos los tipos de piel incluso las más oscuras con total seguridad garantizando los mejores resultados.

Indicaciones:

- Vello indeseado, para todo tipo de piel
- Venas en piernas y rostro
- Tensado de la Piel
- Pseudofoliculitis Barbae (PFB)
- Arrugas
- Lesiones Vasculares

Gentle YAG[®] VR

Elimina las venas de cuerpo y rostro

La pieza de mano del GentleYAG VR cuenta con 2 tamaños de spot (1.5mm y 3mm), que le brinda la máxima versatilidad en el tratamiento de venas del cuerpo y rostro.



Spots (mm)

3 1.5



Gentle YAG[®] SRT

Tensa y Suaviza la piel

Con 3 tamaños de spot (6mm, 8mm y 10mm), la velocidad de 10 Hz le permite mejorar la textura de la piel.



Spots (mm)

10 8 6



Gentle YAG[®] HR

Depilación en todos los tipos de piel

Sus 3 tamaños de spot (12mm, 15mm y 18mm), la velocidad de 2 Hz, aunado al sistema de enfriamiento dinámico DCD lo convierte en el láser más rápido y seguro para la eliminación de vello corporal y facial.



Spots (mm)

18 15 12



Venocidad facial



Eliminación de vellos



Tensado de piel



Más que eliminar vellos


Su inversión en la tecnología **GentleLASE** le permitirá desarrollar más que la depilación de vellos. Los especialistas alrededor del mundo reportan el éxito al usar **GentleLASE** para desarrollar una variedad de tratamientos, incluyendo:

Eliminación de vellos, en todo tipo de piel.

Lesiones Pigmentadas, incluyendo:

- Piel dañada por el sol
- Léntigos
- Pecas
- Melasma
- Café-au-lait
- Keratosis Seborréica

Sistema de Enfriamiento DCD

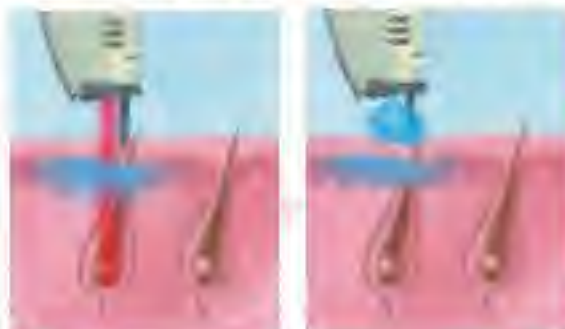

Anomalías vasculares como hemangiomas de venas en piernas y rostro.
Reducción de arrugas.



Eliminación de vellos



con
DCD



Lesiones vasculares







¡Acné y rejuvenecimiento facial!

Compacto, portátil y fácil de usar. Posee el perfecto balance de un enfriamiento controlado de la epidermis con un consistente calentamiento de la dermis superior.

Esta tecnología brinda excelentes resultados a pacientes que sufren de acné, como los que desean reducir líneas de expresión y arrugas, suaviza la aparición de cicatrices por acné y trata la hiperplasia sebácea. **Smoothbeam** le garantiza el retorno de su inversión y resultados muy satisfactorios.

Mecanismo de Acción en Remodelación Dérmica

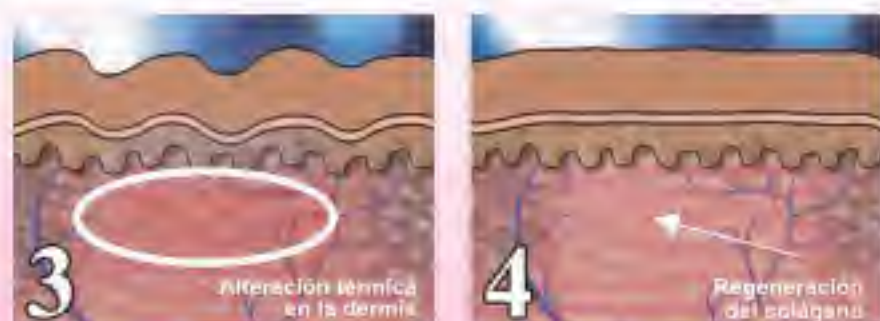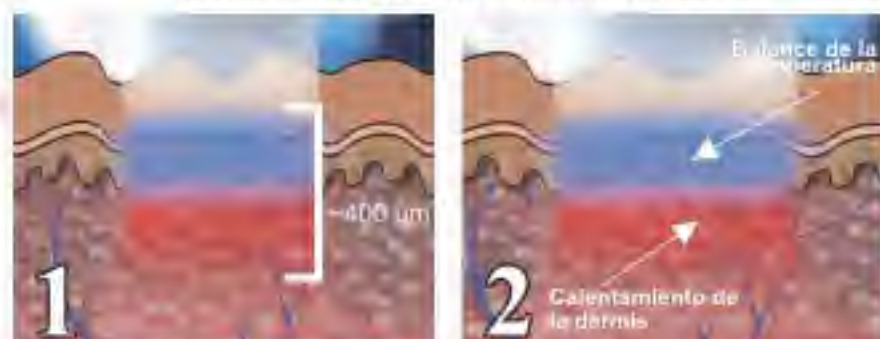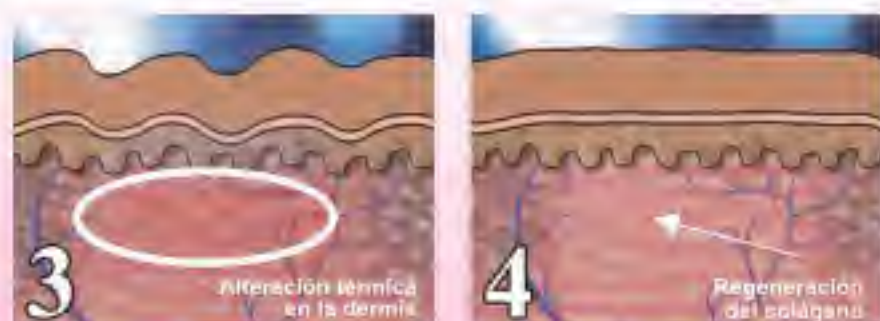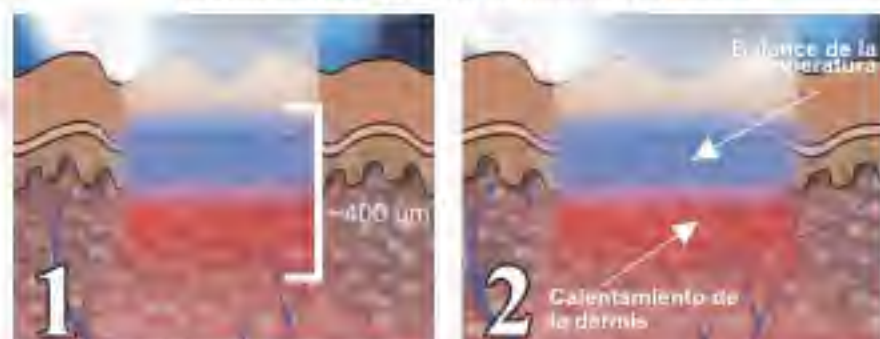

con
DCD



Sistema Dinámico de Enfriamiento Smoothbeam





El láser de colorante pulsado Vbeam® Candela tiene 20 años de trayectoria, probado en seguridad, fiabilidad y eficacia para el tratamiento de una amplia gama de lesiones vasculares. Brinda tecnología de avanzada, aumento de versatilidad y facilidad de uso.

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|
| 🔥 Rejuvenecimiento de piel | 🔥 Venas Faciales | 🔥 Verrugas |
| 🔥 Enrojecimiento difuso | 🔥 Venas en piernas | 🔥 Cicatrices y Estrías |
| 🔥 Pigmentación | 🔥 Lesiones pigmentadas | 🔥 Lagos venosos |
| 🔥 Pecas | 🔥 Arrugas | 🔥 Manchas Vino Oporto |
| 🔥 Manchas Solares | 🔥 Poikiloderma de Civatte | 🔥 Psoriasis |
| 🔥 Rosacea | 🔥 Angiomas | 🔥 Lesiones Vasculares Ginecológicas Benignas |
| 🔥 Acné | 🔥 Hemangiomas | |



Vbeam® Aesthetica

Rejuvenecimiento de la piel

Específicamente diseñada para el rejuvenecimiento de la piel; mejora la consistencia y tonalidad de la piel a través de la eliminación de enrojecimiento y pigmentación. También es ideal en el tratamiento de manchas café no deseadas, incluyendo pecas, manchas solares y pigmentación desigual.

El Vbeam Aesthetica es repotenciable a Vbeam Platinum, para acomodarse al crecimiento de su centro.



Vbeam® Platinum

Lesiones Vasculares


Trata un amplio rango de lesiones vasculares incluyendo faciales y venosas, rosácea, manchas vino oporto, acné y mucho más. La nueva tecnología de micropulsos significa que cada pulso láser en realidad está formado por ocho sub pulsos, brindando uniformidad y consistencia en la calefacción del vaso sanguíneo que permite la mejora en resultados clínicos evitando el púrpura.



Vbeam® Perfecta

Perfecto para todo

Perfecta puede hacerlo todo: desde rejuvenecimiento corrigiendo la decoloración roja y marrón de la piel, como en Estética para eliminar todo tipo de lesiones pigmentadas y vasculares. Posee una tecnología de micropulsos avanzados, múltiples piezas de mano para el tratamiento con diferentes tamaños de spots y el sistema de enfriamiento dinámico DCD, que elimina el tiempo de inactividad previniendo quemaduras.

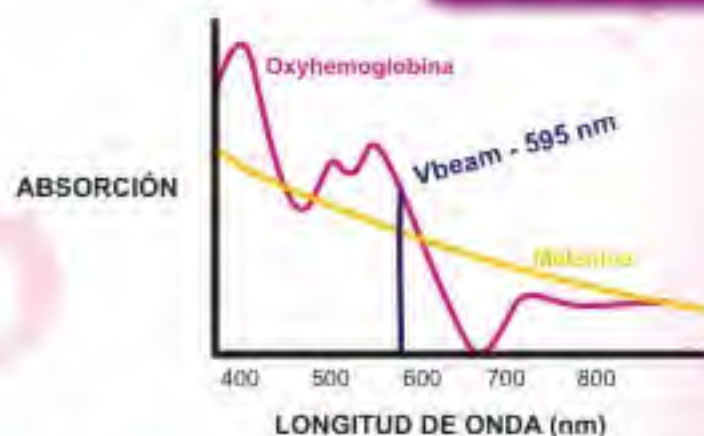

Arrugas Periorbitales



Manchas de Vino Oporto



Venas de las Piernas


GentleMax™ DCD

¡Poder, Versatilidad y Eficacia! en agradable combinación...

Combinando las habilidades de dos de los mejores Láseres GentleLASE y GentleYAG, Candela crea el GentleMAX. Uno de los primeros equipos de configuración única para hacer frente a los procedimientos médico-estéticos más comúnmente solicitados, incluyendo la eliminación permanente del vello, eliminación de venas del rostro y piernas, eliminación de lesiones pigmentadas, vasculares y tensado de la piel. El GentleMAX ofrece a sus usuarios la mejor velocidad y eficacia de manejo en toda la línea Candela brindando mayor poder y versatilidad en sus tratamientos.



Spots (mm)

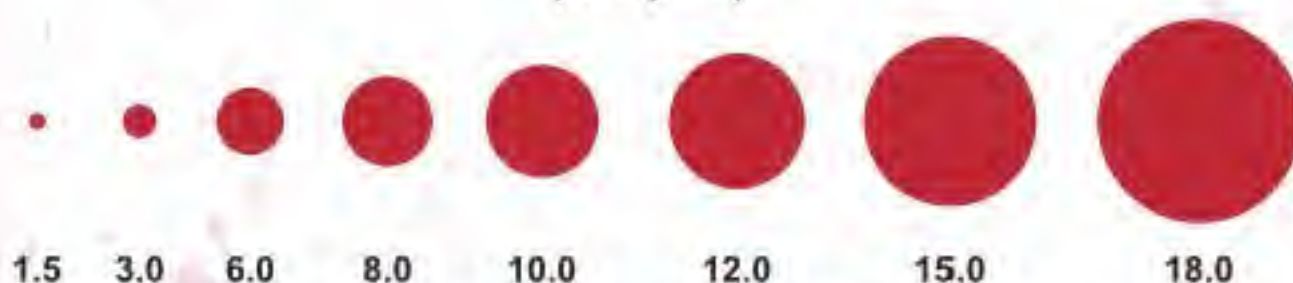

Aplicaciones:

- Eliminación permanente del vello
- Rejuvenecimiento
- Pigmentación
- Tensado de piel
- Reducción de arrugas
- Lesiones Pigmentadas
- Pecas
- Melasma
- Lesiones Vasculares
- Hemangiomas
- Lagos Venosos
- Venosidades faciales



Eliminación de vellos



Rejuvenecimiento



Lesiones Pigmentadas



Venas de las piernas (telagectasias)



DISPOSITIVO DINÁMICO DE ENFRIAMIENTO

Patente exclusiva Candela

El sistema DCD patentado por Candela consiste en el enfriamiento sincrónico de la epidermis durante todo el tratamiento.

con
DCD™

Un mayor beneficio,
velocidad y seguridad
para el paciente.

Prepara la piel para el tratamiento con un rociamiento selectivo sobre las capas superiores con una pequeña explosión de criógeno en ajustables duraciones de rociado, milisegundos antes y después de el pulso del láser. Brinda la misma protección epidérmica sin importar cuan rápido dispara el láser.


Sincronización DCD Láser



Etapas Refrigeración



Etapas Láser

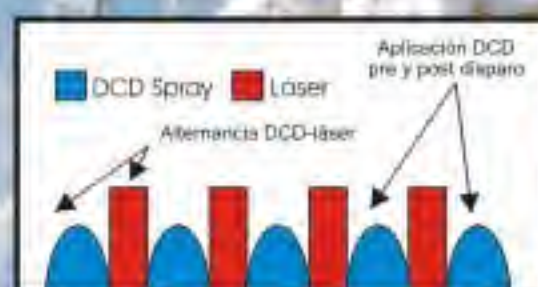



Smoothbeam
Diodos



GentleLASE
Alejandrita



Alex TriVantage
Q-Switched Alejandrita



GentleYAG
Nd: YAG




Vbeam
Colorante Pulsado



GentleMAX
Nd:YAG/Alejandrita

pseudocolitis barboe (PFB)				•		•
marcas de nacimiento		•	•		•	•
lesiones faciales		•		•	•	•
líneas faciales y arrugas	•	•		•	•	•
pecas		•	•		•	•
reducción de vello		•		•		•
venas de las piernas		•		•	•	•
melasma		•	•			•
Nevus de Ota/Ito			•			
lesiones pigmentadas		•	•			•
tensado de la piel				•		•
puntos solares/edad		•	•		•	•
lesiones vasculares		•		•	•	
verrugas					•	•
rejuvenecimiento		•			•	•
acné	•					
cicatrices por acné	•					
hemangiomas					•	
enrojecimiento facial difuso					•	
piel rosácea					•	
cicatrices					•	•
hiperplasia sebácea	•					
remoción de tatuajes			•			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

longitud de onda (nm)	1450	755	532,755, 1064	1064	595	755, 1064
fluencia [energía] (J/cm ²)	8-25	sobre 100	3-12	sobre 600	2 - 40	sobre 600
duración de pulsos	210 ms	3 ms	50 ns, 140 µsec	0.250-300 ms	0.45 - 40 ms	0.250-300 ms
tamaño de spots (mm)	4, 6	6 - 18	2 - 5	1.5 - 18	3 - 12 & 3x10	1.5 - 18
 skin cooling	•	•	•		•	•

Con el Respaldo de:



Los Antares 255-265 Surco
Lima 33 - Perú
Telefax: 271-6391 / 272-1839
/ 271-9859 / 273-0393
Email: phymed@phymed.com.pe



Cumple con el performance estándar FDA para
productos láser: Julio 26, 2002